

## Support capteur mobile



Ref. : **EIM473**


Données techniques :

Poids : 11 Kg  
 Hauteur : de 0 cm à 200 cm  
 Encombrement :  
 H.120 cm x 60 x 60 cm

Compatibilité :


Capteurs DR  
 Cassettes CR  
 Cassettes standard (film)

Sécurité anti-chute

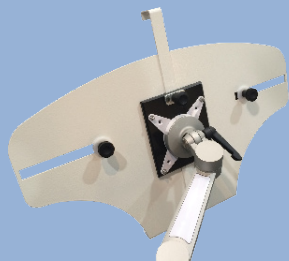

Options :

Support pour protection de grille 36x43 cm. AIM491

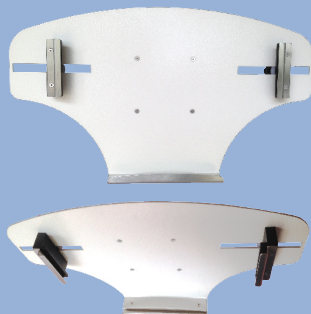

Panier de rangement capteur (ou cassette) à fixer sur le pied. AIM492

Capt'X



Le Nouveau support mobile « CAPT'X EASY » pour capteurs DR ou cassettes CR, ainsi que pour les cassettes standard (film) vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité de ceux-ci rapidement et en toute simplicité.

Le « CAPT'X EASY » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services où vous aurez besoin de faire des radiographies : les urgences, le bloc opératoire, la chambre, dans les salles radio, etc.

Le « CAPT'X EASY » est particulièrement adapté pour les examens nécessitant d'être pris légèrement en dessous ou au-dessus du plateau de table, d'un chariot brancard, d'un fauteuil roulant ou d'un lit. Très pratique pour les examens des chevilles, des pieds, des genoux mais aussi pour toutes les autres parties du corps.

Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d'épaisseur avec une finition époxy (peinture cuite au four). Les roues d'un diamètre de 100 mm lui donnent une grande manœuvrabilité.

Les mouvements verticaux sont télescopiques, le système est suffisamment léger pour ne pas avoir besoin d'assistance de type vérin ou contrepoids, souvent reconnus pour des problèmes mécaniques engendrant des interventions de technicien.

Sa rotule permet de positionner le capteur dans toutes les inclinaisons souhaitées. Le double bras permettant un ajustement souple, rapide et précis de la profondeur du capteur, tout ceci afin de permettre à chaque utilisateur des possibilités de configurations optimales.

